

# JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

## INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK LEGIONELLA

Zanim przystąpisz do pobierania próbki przeczytaj uważnie poniższe informacje.

### DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE



Umieść w zamrażalniku wkłady schładzające, które otrzymałeś w przesyłce. Po ok 8 godz. powinny osiągnąć odpowiednią temperaturę.

Staraj się nie zanieczyścić zakrętki oraz wnętrza pojemnika.

Otwieraj pojemnik tylko na czas ich napełniania.

### WYBIERZ WŁAŚCIWY PUNKT POBORU PRÓBKII

Wybierz kran na instalacji wody ciepłej (najlepiej w łazience), wykonany z metalu, w dobrym stanie technicznym.

Usuń słuchawkę prysznicową, sitka, perlator, itp.

Oczyść końcówkę kranu lub wężyka z osadów za pomocą miękkiej szczoteczki.



### DEZYNFEKCJA PUNKTU POBIERANIA

Zamknij zawór, załóż sterylne rękawiczki (otrzymałeś w przesyłce) i zdezynfekuj końcówkę kranu/wężyka w następujący sposób:

1. Nasącz alkoholem wacik, który otrzymałeś w przesyłce, zapal go i opal delikatnie końcówkę kranu.
2. Otwórz częściowo zawór (średni przepływ), na co najmniej 1 minutę.



Dowiedz się więcej na:  
[aqlab.pl](http://aqlab.pl)

# JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

## INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK LEGIONELLA

### POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Otwórz pojemnik "B". Nie dotykaj wewnętrznych powierzchni pojemnika i zakrętki. W pojemniku znajduje się substancja zabezpieczająca - nie wypłukuj jej!

Napełnij ostrożnie pojemnik pozostawiając niewielką przestrzeń z powietrzem (ok. 1/5 naczynia).

Zamknij ostrożnie pojemnik. Nie dotykaj wewnętrznych powierzchni pojemnika i zakrętki.




### DOSTARCZENIE PACZKI

Wypełnij przesłany formularz, szczególną uwagę zwróć na datę i godzinę pobierania próbek oraz pozostałe niezbędne informacje (rodzaj wody, identyfikację próbki, itp.).

Umieść ostrożnie wszystkie pojemniki w styroboksie.

Nie zapomnij o dołożeniu wkładów chłodzących.

Dostarcz próbkę do laboratorium w możliwie krótkim czasie.

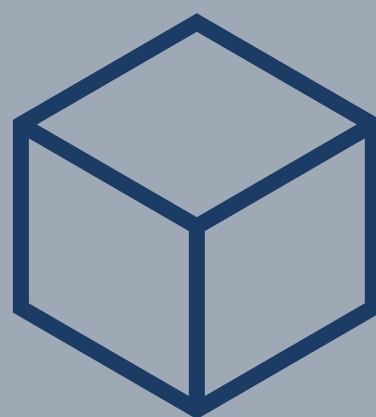


GRATULACJE! POBRAŁEŚ SWOJĄ PRÓBKĘ I  
MOŻESZ JĄ DOSTARCZYĆ DO:

**AQUANET**

LABORATORIUM

ul. Dolna Wilda 126,

61-492 Poznań

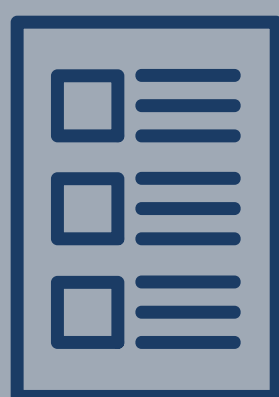

### WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia próbki. Na Twój adres e-mail wyślemy sprawozdanie z badań w postaci pliku .pdf.



Dowiedz się więcej na:  
[aqlab.pl](http://aqlab.pl)